

Ler uma visualização → Construir manualmente → **Construir com IA** → Escrever interpretação →
Interpretação com IA → Detetar perturbação

Construir uma visualização com o Assistente de IA

Atividade · Visualizações e interpretação · ~15 min

ANTES DE COMEÇAR

- ☐ Já construiu pelo menos um gráfico manualmente (ficha anterior)
- ☐ Tem sessão iniciada e a sua pasta aberta
- ☐ Sabe que indicador quer representar (CPN1, Penta3, ...)

O que vai fazer


Pedir ao Assistente de IA que crie o mesmo tipo de gráfico que acabou de construir manualmente — mas escrevendo um pedido em linguagem comum. Mesmo resultado, caminho diferente.

1 Abrir o Assistente de IA

O painel de conversa da IA fica do lado direito do separador **Visualizations**. Escreva um pedido curto, como:

«Mostra-me um gráfico de série temporal das visitas de CPN1 nos últimos 12 meses, usando dados ajustados aos valores atípicos.»

A IA devolve um gráfico no painel com três botões por baixo — **ecrã inteiro**, **Save as new visualization**, **Add to slide deck** — e um texto curto a explicar o que construiu e o que poderia mudar a seguir.

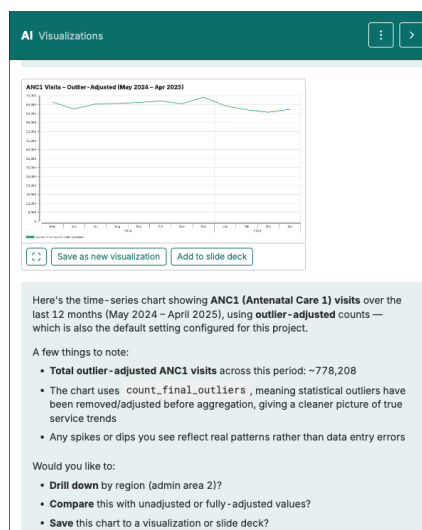

Seja específico quanto ao ajustamento. «*Dados ajustados*» sozinho é ambíguo — a métrica expõe quatro versões: sem ajustamento, valores atípicos só, completude só, ou ambos. Diga qual no pedido, ou a IA escolhe por si (normalmente valores atípicos só).

2 Rever o que a IA devolve

O gráfico aparece no topo do painel; o texto por baixo nomeia o indicador, o período e qual o ajustamento usado. **Confronte-o com o que pediu:**

- Indicador certo? Período certo?
- Gráfico de linhas para uma tendência, ou outra coisa? Faz sentido?
- Qual o ajustamento? O texto nomeia-o explicitamente (p. ex. *ajustado aos valores atípicos*).

Se algo estiver errado, diga-o em linguagem comum na mesma conversa — «*Usa antes os dados brutos*», «*Muda para gráfico de barras*», «*Cobre só os últimos 6 meses*».

3 Iterar

A primeira resposta raramente entrega o gráfico exato que quer. Refine em pequenos passos:

- «*Desagrega por região.*»
- «*Acrésceta Penta3 no mesmo eixo.*»
- «*Mostra só os últimos 6 meses.*»

Cada instrução é um pequeno passo. A IA também propõe ações seguintes no fim de cada resposta — use-as ou ignore-as.

4 Guardar

Quando gostar do que vê, clique em **Save as new visualization** por baixo do gráfico e coloque-o na sua pasta. O botão ao lado **Add to slide deck** faz as duas coisas de uma vez se já tiver uma apresentação aberta.

Experimente com três indicadores

Repita o mesmo fluxo com três indicadores diferentes — escolha de programas distintos (CPN, vacinação, parto). Vai ganhar sensibilidade para como a IA interpreta pedidos curtos.

Manual vs IA — quando usar cada um

- **Manual** quando sabe exatamente o que quer e clicar é mais rápido do que escrever.
- **IA** quando quer explorar — «*mostra-me algo útil sobre X*» — ou quando não se lembra dos nomes exatos dos filtros.

A IA é um acelerador, não um substituto. É você que decide se o gráfico responde à sua pergunta.

A seguir

A próxima ficha é sobre **escrever a interpretação** — o texto que acompanha o gráfico no diapositivo. Use o quadro de seis passos da referência *Ler uma visualização*.

🔍 **Confirme na sua interface atual:** os nomes dos botões e a disposição da conversa da IA podem diferir ligeiramente. O fluxo (pedir → rever → iterar → guardar) é o mesmo.